

Aidite[®]

TERMÉKKATALÓGUS



Cameo Zirkon Gyors Szinterező Kemence

CSF-200

A **CSF-200** egy speciális kemence cirkónium-oxid anyagok gyors szinterezésére. A cameo gyors szinterező kemence új generációs termékeként tökéletes illeszkedéseket ért el az Aidite cirkónium anyagokkal. Ugyanakkor a kemence 900°C-on történő kinyitásának tervezése és az intelligens kezelőmodulok hozzáadása nagymértékben javította a pótlások feldolgozási hatékonyságát.

Két méret, különböző alkalmazási lehetőségekkel.

A kétféle méret és az "orvosi fehér" szín lehetővé teszi a rendelőkben és a laborokban történő alkalmazását.

CSF-200S

Cameo Zirkon Gyors Szinterező Kemence



CSF-200L

Cameo Zirkon Gyors Szinterező Kemence
CSF-200L



KEMENCE ADATAI

Modell	CSF-200S	CSF-200L
Méret (M x SZ x M)	330 x 470 x 700mm	370 x 510 x 780mm
Kemencetér mérete	Φ70 × 80 mm	Φ100 × 120 mm
Súly	37.5 kg	50 kg
Energiafelvétel	220V/50Hz	220V/50Hz
Névleges teljesítmény	1.5 KW	2.5 KW
Fűtőszál	3 szilícium-karbid elem	4 szilícium-karbid elem
Szinterezési módok	Gyors szinterezés Lassú szinterezés	Gyors szinterezés Lassú szinterezés
Leggyorsabb szinterezési idő	2.5 óra	3 óra
Szinterezhető tagok száma (Max)	30 tag	70 tag
Szinterprogram tárhely	20	20

A CSF-200 cirkónium-szinterező kemence használatával az Aidite cirkónium-oxid anyagok legideálisabb hatása érhető el.

--Yanny Wu, Aidite Zirconia Material R&D Center

A CSF-200 szinterező kemence választása lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabban és jobban kiszolgáljuk a klinikákat és a betegeket.

--Waite Yuan, Courage Denture lab

NAGY TISZTASÁGÚ SZILÍCIUM-KARBID FÜTŐSZÁLAK

Nem szennyezik a cirkon anyagot

	Szín	ΔL	Δc	Δh
10x színterezés esetén	A3	0.7	0.7	0.6
200x színterezés esetén	A3	0.7	0.6	0.6

- Note: ΔL Fényességi érték
- Δc Telítettségi érték
- Δh Színtónus érték



10x színterezés



200x színterezés



Nem szennyezik a
cirkon anyagot



10x színterezés



200x színterezés




Szilícium-karbid
fűtőszál

HATÉKONY ÉS INTELLIGENS ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB

Törekedjen a tökéletes szinterezésre és folyamatosan frissítse az intelligens alkalmazásokat

A kemence 900°C-on nyitható

Gyorsítsa a hűtési sebességet és így a következő szinterezés már 500°C-ról indítható, így időt takarít meg.

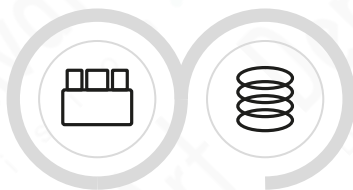

Az égetési ciklus megszakítása elleni védelem

Ha valamiért megszakadna a szinterzési folyamat, akkor manuálisan kiválasztható és folytatható a program a megszakadás időpontjától, így nem kell azt előlről kezdeni.



Szilícium-karbid fűtőszál, élettartam emlékeztető

Ez az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót a fűtőszálak cseréjére, mielőtt a fűtőszálak elérik az élettartamuk végét, ezáltal garantálva a folyamatos és megismételhető sikeres szinterezést

Egy gomb és Start


20 programtárhely 10 fix és 10 szabadon programozható szinterzési lehetőséggel.

UI Interface

Egyszerű design, intuitív és felhasználóbarát kezelőfelület



Fő égetési ciklus, valós idejű státusszal

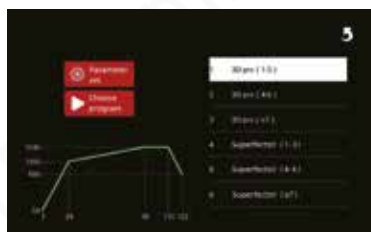

Programválasztás



A szinterzési ciklus paramétereinek egyszerű változtatása

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt
D i v i s i o n • K f t.



H-9400, Sopron
Faller Jenő utca 16



info@dentavantgart.hu



www.dentavantgart.hu
www.shop.dentavantgart.hu



+36-99/314-931